

PL. ŻEL PRZEWODZĄCY DO ELEKTROD

Żel przewodzący do zabiegów elektromedycznych (TENS, EKG, EMG i defibrylacji).

Produkt jest sprzedawany w następujących formatach i jest oznaczony następującymi numerami katalogowymi

REF	Opis
602047	Butelka 250 ml z dozownikiem

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. W razie potrzeby oczyścić i osuszyć obszar nałożenia.
2. Nałożyć niewielką ilość żelu na przewodzący obszar elektrody.
3. Przeprowadzić zabieg postępując zgodnie z typowymi protokołami.
4. Zdjąć elektrody, usunąć pozostałości żelu za pomocą jednorazowego ręcznika i usunąć produkt zgodnie z odpowiednim protokołem. Jeśli elektrody są przeznaczone do wielokrotnego użytku, należy postępować zgodnie z instrukcjami konserwacji określonymi przez producenta.

CZAS STOSOWANIA

Elektrody należy wymienić, jeśli zauważy się jakiegokolwiek pogorszenie jakości lub najpóźniej po 24 godzinach.

OSTRZEŻENIA

Żel powinien być stosowany wyłącznie przez lub pod nadzorem pracownika służby zdrowia zaznajomionego z jego zastosowaniem i właściwym używaniem. - Nakładanie żelu na elektrody wstępnie pokryte żelem zwykle nie jest potrzebne, ale jeśli jest to konieczne, należy umieścić (nałożyć) kroplę na środek elektrody. - W razie wystąpienia alergii lub innej reakcji skórnej pacjent musi zostać natychmiast zbadany przez lekarza. - Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi stosowania i usuwania produktu. - Do stosowania wyłącznie na czystej, nieuszkodzonej skórze (nie stosować na otwartych ranach, zmiana ani w obszarach zakażonych lub zajętych stanem zapalnym). - Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. - W razie przypadkowego poknięcia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. - Żel jednorazowy. Ponowne użycie u różnych pacjentów może spowodować przeniesienie zakażenia. - Nie zanurzać, nie płukać i nie sterylizować tego produktu, ponieważ są to procedury, które mogą pozostawić toksyczne pozostałości lub wywołać niewłaściwe funkcjonowanie. Ani konstrukcja produktu ani materiały użytego do jego produktu nie są zgodne z tradycyjnymi procedurami czyszczenia i sterylizacji. - Nie używać produktu, jeśli żel jest suchy lub zmienił kolor. - Zalecane granice temperatury podczas przechowywania to od 5°C (41°F) do 40°C (104°F). - Należy sprawdzić termin ważności na opakowaniu. - Niewłaściwe użycie lub niewłaściwe nałożenie żelu może spowodować działania niepożądane i (lub) spowodować nieskuteczność terapii.

USUWANIE

Żel należy usunąć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Usunąć opakowanie, postępując zgodnie z protokołami dotyczącymi postępowania z odpadami przeznaczonymi do recyklingu.

GWARANCJA

Firma TELIC, S.A.U. gwarantuje, że produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych i został wyprodukowany zgodnie z procedurami systemu zarządzania jakością firmy TELIC, S.A.U., certyfikowanym zgodnie z normą ISO 13485. Firma TELIC, S.A.U. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty medyczne lub bezpośrednie ani pośrednie szkody spowodowane brakiem działania lub nieprawidłową obsługą produktów, gdy są one używane niezgodnie z instrukcją użycia. Zalecamy należyte zgłaszanie wszelkich problemów operacyjnych lub usterek produktu do działu zapewnienia jakości firmy TELIC, S.A.U. (incidents@telic.es). W przypadku jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z produktem, należy go natychmiast zgłosić do firmy TELIC, S.A.U. i/lub właściwego organ państwa członkowskiego, w którym wystąpiło zdarzenie.

NL. GELEIDENDE GEL VOOR ELEKTRODEN

Geleidende gel voor elektromedische procedures (TENS, ECG, EMG en defibrillatie).

Het product wordt verkocht in de volgende formaten en referenties

REF	Beschrijving
602047	250 ml fles met doseerdop

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Reinig en droog het toepassingsgebied, indien nodig.
2. Breng een kleine hoeveelheid gel aan op het geleidende gedeelte van de elektrode.
3. Voer de procedure uit volgens de gebruikelijke protocollen.
4. Maak de elektroden los, verwijder de resterende gel met een wegwerphanddoek en voer het product af volgens het bijbehorende protocol. Als de elektroden herbruikbaar zijn, volg dan de onderhoudsinstructies van de fabrikant.

GEBRUIKSDUUR

De elektroden moeten vervangen worden indien hun kwaliteit is achteruitgegaan, of uiterlijk na 24 uur.

WAARSCHUWINGEN

De gel mag enkel worden gebruikt door of onder toezicht van een zorgverlener die vertrouwd is met zijn toepassing en het juiste gebruik. - Doorgaans hoeft geen gel te worden aangebracht op de elektroden, aangezien ze al gel hebben; is het toch nodig, breng dan een druppel op het midden van de elektrode aan. - Als er een allergie of andere huidreactie optreedt, moet de patiënt onmiddellijk door een arts worden beoordeeld. - Volg de instructies voor gebruik en verwijdering van het product. - Uitsluitend voor gebruik op een schone, onbeschadigde huid (niet gebruiken op open wonden, laesies of geïnfecteerde of ontstoken gebieden). - Het product is enkel voor uitwendig gebruik. - Raadpleeg onmiddellijk een arts als het product per ongeluk wordt ingeslikt. - Gel voor eenmalig gebruik. Hergebruik voor verschillende patiënten kan kruisbesmetting veroorzaken. - Dit product niet onderdompelen, afspoelen of steriliseren, aangezien dit procedures zijn die giftige resten kunnen achterlaten of een slechte werking kunnen veroorzaken. Noch het productontwerp, noch de materialen waarmee het product is vervaardigd, zijn compatibel met conventionele reinigings- en sterilisatieprocedures. - Gebruik het product niet als de gel droog is of van kleur is veranderd. - De aanbevolen temperatuurlimieten voor opslag liggen tussen 5°C (41°F) en 40°C (104°F). - Controleer de vervaldatum op de container. - Het verkeerde gebruik of een onjuiste toepassing van de gel kan leiden tot incidenten en/of ondoelmatige therapie.

VERWIJDERING

De gel moet worden verwijderd volgens de huidige richtlijnen. Gooi de verpakking weg volgens de protocollen voor het beheer van recyclebaar afval.

GARANTIE

TELIC, S.A.U. garandeert dat het product voldoet aan de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en is vervaardigd volgens de procedures van het TELIC, S.A.U. kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO-norm 13485. TELIC, S.A.U. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor medische kosten of directe of indirecte schade als gevolg van het niet of onjuist bedienen van de producten zonder inachtneming van de gebruiksaanwijzing. We raden u aan om elk operationeel probleem of productfout naar behoren te melden aan de Quality Assurance Department van TELIC, S.A.U. (incidents@telic.es). In geval van een ernstig incident met betrekking tot het product, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan TELIC, S.A.U. en/of de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident zich voordoet.

IT. GEL CONDUTTORE PER ELETTRODI

Gel conduttore per procedure elettromedicali (TENS, ECG, EMG e defibrillazione).

Il prodotto viene commercializzato con i seguenti formati e riferimenti

REF	Descrizione
602047	Flacone da 250 ml con tappo dosatore

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Pulire e asciugare l'area di applicazione, se del caso.
2. Applicare una piccola quantità di gel sull'area conduttiva dell'elettrodo.
3. Eseguire la procedura seguendo i consueti protocolli.
4. Togliere gli elettrodi, rimuovere il gel residuo con un asciugamano monouso e smaltire il prodotto secondo il protocollo appropriato. Se gli elettrodi sono riutilizzabili, seguire le istruzioni di manutenzione indicate dal produttore.

DURATA D'USO

Sostituire gli elettrodi se si nota un deterioramento della qualità o al massimo dopo 24 ore.

AVVERTENZE

Il gel deve essere usato solo da o sotto la supervisione di un operatore sanitario che abbia dimestichezza con la sua applicazione e l'uso appropriato. - In genere non è necessaria l'applicazione di elettrodi pregellati ma, se necessario, applicare una goccia al centro dell'elettrodo. - In caso di allergia o altra reazione cutanea, consultare immediatamente un medico - Seguire le istruzioni per l'uso e lo smaltimento del prodotto - Per l'uso solo sulla pelle integra e pulita (non usare su ferite aperte, lesioni o zone infette o infiammate) - Prodotto non adatto all'uso interno. - In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico - Gel monouso. Il riutilizzo in pazienti diversi può provocare contaminazione crociata. - Non immergere, sciacquare, né sterilizzare il prodotto, in quanto si tratta di procedure che possono lasciare residui nocivi o causare malfunzionamenti. Né il prodotto né i materiali di cui è fatto sono compatibili con le procedure convenzionali di pulizia e sterilizzazione - Non utilizzare il prodotto se il gel è secco o in caso di alterazioni del colore - L'intervallo raccomandato per la temperatura di immagazzinamento è compreso tra 5°C e 40°C - Verificare la data di scadenza sulla confezione - L'uso inadeguato o l'applicazione errata del gel può causare eventi avversi e/o rendere inefficace la terapia.

SMALTIMENTO

Rimuovere il gel in conformità con le linee guida attualmente vigenti. Smaltire l'imballaggio attenendosi al sistema di gestione dei rifiuti riciclabili.

AVVISO DI GARANZIA

TELIC, S.A.U. garantisce che il prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 sui Dispositivi Medici ed è stato realizzato seguendo le procedure del sistema di gestione per la qualità di TELIC, S.A.U. certificato ISO 13485. TELIC, S.A.U. declina ogni responsabilità relativamente a qualsiasi spesa medica e danno diretto o indiretto dovuti al mancato funzionamento o al non corretto funzionamento dei prodotti se non utilizzati in ottemperanza alle istruzioni per l'uso. Si raccomanda di informare tempestivamente il Reparto Garanzia di Qualità di TELIC S.A.U. in caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento o al difetto del prodotto (incidents@telic.es). In caso di incidente grave relativo al prodotto, inviare immediatamente una segnalazione a TELIC, S.A.U. e/o all'autorità competente dello Stato membro in cui l'incidente ha avuto luogo.

FR. GEL CONDUCTEUR POUR ÉLECTRODES

Gel conducteur pour applications en électro médecine (TENS, ECG, EMG, défibrillation).

Le produit est commercialisé sous les formats et références ci-dessous.

REF	Description
602047	Bouteille 250 ml avec bouchon de dosage

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer et sécher la zone d'application, le cas échéant.
2. Appliquer une noisette de gel sur la surface conductrice de l'électrode.
3. Effectuer la procédure selon les protocoles habituels.
4. Retirer les électrodes, enlever le gel restant à l'aide d'une lingette jetable, puis éliminer le produit selon le protocole correspondant. Si les électrodes sont réutilisables, suivre les instructions d'entretien indiquées par le fabricant.

TEMPS D'UTILISATION

Les électrodes doivent être remplacées si une détérioration de la qualité est détectée ou au plus tard au bout de 24 heures.

MISES EN GARDE

Le gel ne doit être utilisé que par ou sous la direction d'un professionnel de la santé connaissant son application et son bon usage. - L'utilisation de gel sur des électrodes pré gélifiées n'est normalement pas nécessaire, mais si besoin verser une goutte de gel sur le centre de l'électrode. - En cas d'allergie ou de toute autre réaction cutanée, elle doit être immédiatement évaluée par un médecin. - Suivre le mode d'emploi et les instructions d'élimination du produit. - À utiliser uniquement sur une peau saine et propre (ne pas utiliser sur des plaies, des blessures, des zones infectées ou une inflammation de la peau). - Le produit n'est pas destiné à un usage interne. - En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. - Gel à usage unique. La réutilisation sur différents patients peut entraîner des infections croisées. - Ne pas immerger, rincer ou stériliser ce produit, car ces procédures peuvent laisser des résidus nocifs ou provoquer un dysfonctionnement. Ni le design du produit ni les matériaux avec lesquels il est fabriqué ne sont compatibles avec les procédures conventionnelles de nettoyage et de stérilisation. - Ne pas utiliser le produit si le gel est sec ou a changé de couleur. - Les limites de température recommandées pour son stockage se situent entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F) - Vérifier la date de péremption indiquée sur l'emballage. - L'usage impropre ou l'application incorrecte du gel peut causer des incidents et/ou rendre inefficace la thérapie.

ÉLIMINATION

Le produit doit être éliminé, conformément à la norme en vigueur. Éliminer l'emballage selon les directives en matière de gestion des déchets recyclables.

AVIS DE GARANTIE

TELIC, S.A.U. garantit que le produit est conforme au règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux et qu'il a été fabriqué dans le respect des procédures du système de gestion de la qualité de TELIC, S.A.U. certifié selon la norme ISO 13485. TELIC, S.A.U. décline toute responsabilité pour les frais médicaux et les dommages directs ou indirects résultant d'un dysfonctionnement ou d'un fonctionnement incorrect des produits lorsqu'ils sont utilisés sans respecter le mode d'emploi. Nous recommandons de signaler tout dysfonctionnement ou défaut du produit au service d'assurance qualité de TELIC, S.A.U. dans les plus brefs délais (incidents@telic.es). Il convient également de signaler immédiatement tout incident grave lié au produit à TELIC, S.A.U. et/ou à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident a eu lieu.

EN. CONDUCTIVE GEL FOR ELECTRODES

Conductive gel for electro-medical procedures (TENS, ECG, EMG and defibrillation).

The product is sold in the following formats and references

REF	Description
602047	250 ml bottle with dispensing cap

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Clean and dry the area of application, if necessary.
2. Apply a small amount of gel to the conductive area of the electrode.
3. Carry out the procedure following the usual protocols.
4. Detach the electrodes, remove the remaining gel with a disposable towel and dispose of the product in accordance with the corresponding protocol. If the electrodes are reusable, follow the maintenance instructions indicated by the manufacturer.

TIME FOR USE

The electrodes should be replaced if any deterioration in quality is noted, or after 24 hours at most.

WARNINGS

The gel should only be used by or under the supervision of a healthcare professional who is familiar with its application and proper use. - Application of gel on pregelled electrodes is normally not needed but, if necessary, pour (apply) a drop on the centre (center) of the electrode. - If an allergy or other skin reaction occurs, the patient must be assessed by a doctor immediately. - Follow the instructions for use and disposal of the product. - For use on clean, unbroken skin only (do not use on open wounds, lesions or infected or inflamed areas). - The product is for external use only. - In the event of accidental ingestion, consult a doctor immediately. - Single-use gel. Reuse for different patients can cause cross-contamination. - Do not submerge, rinse or sterilise this product, as they are procedures that can leave toxic residue or cause poor functioning. Neither the product design nor the materials with which it is manufactured are compatible with conventional cleaning and sterilisation procedures. - Do not use the product if the gel is dry or has changed colour. - The recommended temperature limits for storage are between 5°C (41°F) and 40°C (104°F). - Check the expiry date on the container. - Improper use or incorrect application of the gel may cause adverse events and/or render the therapy ineffective.

DISPOSAL

The gel should be removed in compliance with current guidelines. Dispose of the packaging following the recyclable waste management protocols.

WARRANTY

TELIC, S.A.U. guarantees that the product complies with the Regulation (EU) 2017/745 on Medical devices and was manufactured following the procedures of the TELIC, S.A.U. quality management system certified under ISO standard 13485. TELIC, S.A.U. accepts no liability for any medical costs or direct or indirect harm due to the lack of operation or incorrect operation of the products when used without observing the instructions for use. We advise you to duly report any operational problem or product fault to the Quality Assurance Department of TELIC, S.A.U. (incidents@telic.es). In the event of any serious incident related to the product, this must be reported immediately to TELIC, S.A.U. and/or the competent authority of the Member State in which the incident occurs.

ES. GEL CONDUCTOR PARA ELECTRODOS

Gel conductor para procedimientos electromédicos (TENS, ECG, EMG y desfibrilación).

El producto se comercializa bajo los siguientes formatos y referencias

REF	Descripción
602047	Botella de 250ml con tapón dosificador

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar y secar la zona de aplicación, si procede.
2. Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre el área conductora del electrodo.
3. Realice el procedimiento siguiendo los protocolos habituales.
4. Despegar los electrodos, retirar el gel restante con una toalla desechable y desechar el producto según el protocolo correspondiente. Si los electrodos son reutilizables, seguir las instrucciones de mantenimiento indicadas por el fabricante.

TIEMPO DE USO

Debe sustituir los electrodos si observa un deterioro de la calidad o, como máximo, al cabo de 24 horas.

ADVERTENCIAS

El gel solo debe utilizarse por o bajo la supervisión de un profesional sanitario que esté familiarizado con su aplicación y uso adecuado. - Los electrodos pregelados no requieren la aplicación de gel conductor, pero en caso de necesidad, se puede verter una gota de gel en parte central del electrodo. - Si se presenta una alergia u otra reacción cutánea, debe valorarla inmediatamente un médico – Seguir las instrucciones de uso y de eliminación del producto – Para uso solo en la piel íntegra y limpia (no usar en heridas abiertas, lesiones o zonas infectadas o inflamadas) – El producto no es para uso interno.- En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente a un médico – Gel de un solo uso. La reutilización en pacientes distintos puede provocar infecciones cruzadas. - No sumerja, enjuague ni esterilice este producto, ya que son procedimientos que pueden dejar residuos nocivos o causar un mal funcionamiento. Ni el diseño del producto ni los materiales con los que está fabricado son compatibles con los procedimientos convencionales de limpieza y esterilización – No utilice el producto si el gel está seco o ha cambiado de color – Los límites de temperatura recomendados para su almacenamiento son entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F) – Compruebe la fecha de caducidad en el envase – El uso inadecuado o la aplicación incorrecta del gel pueden causar efectos adversos y/o hacer que la terapia sea ineficaz.

ELIMINACIÓN

Debe eliminarse el gel de acuerdo con las directrices actuales. Desechar el envase siguiendo la gestión de residuos reciclables.

AVISO DE GARANTÍA

TELIC, S.A.U. garantiza que el producto cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y ha sido fabricado siguiendo los procedimientos del sistema de gestión de calidad de TELIC, S.A.U. certificado bajo la norma ISO 13485. TELIC, S.A.U. declina cualquier responsabilidad en relación con todos los costes médicos y daños directos o indirectos debidos a la falta de funcionamiento o al funcionamiento incorrecto de los productos cuando se utilicen sin respetar las instrucciones de uso. Recomendamos informar oportunamente sobre cualquier problema de funcionamiento o defecto del producto al Departamento de Garantía de Calidad de TELIC, S.A.U. (incidents@telic.es). En caso de incidente grave relacionado con el producto, este debe ser comunicado inmediatamente a TELIC, S.A.U. y/o a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el incidente tuvo lugar.

DE. KONTAKTGEL FÜR ELEKTRODEN

Kontaktgel für elektromedizinische Verfahren (TENS, EKG, EMG und Defibrillation).

Das Produkt wird in den folgenden Packungsgrößen und mit den folgenden Artikelnummern in Verkehr gebracht:

REF	Beschreibung
602047	Flasche à 250 ml mit Dosierkappe

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Anwendungsbereich bei Bedarf reinigen und trocknen.
2. Eine kleine Menge Gel auf die Kontaktfläche der Elektrode auftragen.
3. Führen Sie das Verfahren nach den üblichen Protokollen durch.
4. Elektroden entfernen, Gelreste mit einem Einwegtuch abnehmen und Produkt vorschriftsgemäß entsorgen. Bei wiederverwendbaren Elektroden die Anweisungen des Herstellers zur Instandhaltung befolgen.

NUTZUNGSDAUER

Wenn eine Qualitätsverschlechterung festgestellt wird bzw. nach spätestens 24 Stunden müssen die Elektroden ersetzt werden.

WARNHINWEISE

Das Gel darf nur von oder unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft verwendet werden, die mit der Applikation und korrekten Anwendung des Gels vertraut ist. - In der Regel muss auf vorgegelte Elektroden kein Gel aufgetragen werden. Sollte dies jedoch nötig sein, einen Tropfen auf die Mitte der Elektrode auftragen. - Bei Auftreten einer Allergie oder einer anderen unerwünschten Reaktion sollte diese sofort von einem Arzt beurteilt werden - Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung und Entsorgung des Produkts - Nur zur Verwendung auf sauberer, intakter Haut (nicht auf offenen Wunden, Läsionen, infizierten oder entzündeten Bereichen anwenden) - Nur zur äußerlichen Anwendung - Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen - Produkt zum einmaligen Gebrauch. Eine Wiederverwendung bei unterschiedlichen Patienten kann zu Kreuzinfektionen führen. - Das Produkt nicht in Wasser tauchen, spülen oder sterilisieren, da diese Verfahren schädliche Rückstände hinterlassen oder Fehlfunktionen verursachen können. Weder das Produktdesign noch die Materialien, aus denen es hergestellt ist, sind mit herkömmlichen Reinigungs- und Sterilisationsverfahren kompatibel - Produkt nicht verwenden, wenn das Gel eingetrocknet oder verfärbt ist - Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 5°C und 40°C - Siehe Verfalldatum auf der Verpackung - Ein unsachgemäßer Gebrauch oder eine falsche Anwendung des Gels kann zu unerwünschten Ereignissen und/oder einer erfolglosen Therapie führen.

ENTSORGUNG

Gel unter Befolgung der geltenden Richtlinien entfernen. Entsorgen Sie die Verpackung als recyclingfähigen Abfallstoff.

GARANTIEERKLÄRUNG

TELIC, S.A.U. garantiert, dass das Produkt der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte entspricht und in Übereinstimmung mit den Verfahren des nach der Norm ISO 13485 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems von TELIC, S.A.U. hergestellt wurde. TELIC, S.A.U. lehnt jegliche Verantwortung für alle medizinischen Kosten und direkten oder indirekten Schäden ab, die auf die mangelnde oder falsche Funktionsweise der Produkte zurückzuführen sind, wenn diese ohne Beachtung der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, Funktionsdefekte oder Produktmängel rechtzeitig an die Qualitätssicherungsabteilung von TELIC, S.A.U. zu melden (incidents@telic.es). Im Falle eines schwerwiegenden produktbezogenen Vorfalls muss dieser sofort an TELIC, S.A.U. und/oder die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Vorfall ereignet, gemeldet werden.

SV. LEDANDE GEL FÖR ELEKTRODER

Ledande gel för elektromedicinska procedurer (TENS, EKG, EMG och defibrillering).

Produkten säljs i följande format och referensnummer

REF	Beskrivning
602047	250 ml flaska med dispenseringslock

BRUKSANVISNING

1. Rengör och torka av appliceringsområdet vid behov.
2. Applicera en liten mängd gel på elektrodens ledande område.
3. Utför proceduren enligt gängse rutiner.
4. Koppla bort elektroderna, avlägsna återstående gel med en engångshandduk och kassera produkten enligt gällande regler. Följ tillverkarens underhållsanvisningar om elektroderna är för flergångsbruk.

ANVÄNDNINGSTID

Elektroderna ska bytas ut om någon avvikelse i kvaliteten upptäcks eller efter högst 24 timmar.

VARNINGAR

Gelen får endast användas av eller under överinseende av sjukvårdspersonal som är bekanta med dess applicering och korrekt användning. – Applicering av gel på fögelade elektroder behövs vanligen inte men, vid behov, kan du hålla (applicera) en droppe på elektrodens mitt. – Om en allergisk eller annan hudreaktion inträffar måste patienten omedelbart bedömas av en läkare. – Följ anvisningarna gällande användning och kassering av produkten. – Produkten är endast avsedd för användning på ren och hel hud (får inte användas på öppna sår, lesioner eller infekterade eller inflammerade områden). – Produkten är endast avsedd för utvärtes bruk. – Konsultera omedelbart läkare vid oavsiktligt intag. – Gel för engångsbruk. Återanvändning till olika patienter kan orsaka korskontaminering. – Produkten får inte sänkas ner i vatten, sköljas eller steriliseras eftersom detta kan efterlämna toxiska rester eller leda till försämrad funktion. Varken produktens utförande eller materialet den är tillverkad av är kompatibla med sedvanliga rengörings- och steriliseringsprocedurer. – Produkten får inte användas om gelen är torr eller har förändrad färg. – De rekommenderade temperaturgränserna för förvaring är 5 °C–40 °C. – Kontrollera utgångsdatumet på behållaren. – Felaktig användning eller felaktig applicering av gelen kan orsaka biverkningar och/eller en ineffektiv behandling.

KASSERING

Gelen ska avlägsnas enligt aktuella riktlinjer.

Kassera förpackningen i enlighet med gällande regler för avfallsåteranvändning.

GARANTI

TELIC, S.A.U. garanterar att produkten följer Reglering (EU) 2017/745 för medicintekniska produkter och har tillverkats enligt procedurerna för TELIC, S.A.U. kvalitetshanteringssystem som är certifierat under ISO-standard 13485. TELIC, S.A.U. ansvarar inte för några medicinska kostnader, direkt eller indirekt skada till följd av brist på användning eller felaktig användning av produkterna när de används utan att följa bruksanvisningen. Vi rekommenderar att alla funktionsproblem eller produktfel rapporteras vederbörligen till Quality Assurance Department (kvalitetssäkringsavdelningen) på TELIC, S.A.U. (incidents@telic.es). I händelse av allvarlig incident relaterad till produkten måste denna omedelbart rapporteras till TELIC, S.A.U. och/eller behörig tillsynsmyndighet i medlemsstaten i vilken incidenten inträffar.

PT. GEL CONDUTOR PARA ELÉTRODOS

Gel condutor para procedimentos eletromédicos (TENS, ECG, EMG e desfibrilação).

O produto comercializa-se sob os formatos e referências seguintes

REF	Descrição
602047	Garrafa de 250 ml com tampão doseador

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Limpar e secar a zona de aplicação, se se aplicar.
2. Aplicar uma pequena quantidade de gel sobre a área condutora do eletrodo.
3. Realize o procedimento de acordo com os protocolos habituais.
4. Retira os eletrodos, retirar o gel restante com um toalhete descartável e eliminar o produto segundo o protocolo correspondente. Se os eletrodos forem reutilizáveis, seguir as instruções de manutenção indicadas pelo fabricante.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO

Os eletrodos devem ser substituídos se se observar alguma deterioração da qualidade ou, no máximo, após 24 horas.

ADVERTÊNCIAS


O gel só deve ser utilizado por ou sob a supervisão de um profissional de saúde familiarizado com a sua aplicação e utilização adequada. - Normalmente, não é necessária a aplicação de gel em eletrodos com gel aplicado previamente, mas, se necessário, verta (aplique) uma gota no centro do eletrodo. - Se se apresentar uma alergia ou outra reação cutânea, um médico deve avaliá-la imediatamente - Seguir as instruções de utilização e de eliminação do produto - Para utilização apenas em pele íntegra e limpa (não utilizar em feridas abertas, lesões ou zonas infetadas ou inflamadas) - O produto não se destina a uso interno.- Em caso de ingestão acidental, consulte imediatamente um médico - Gel de utilização única. A reutilização em diferentes pacientes pode provocar infeções cruzadas- - Não mergulhe, enxague nem esterilize este produto, uma vez que são procedimentos que podem deixar resíduos nocivos ou causar um mau funcionamento. Nem o desenho do produto nem os materiais com os quais é fabricado são compatíveis com os procedimentos convencionais de limpeza e esterilização - Não utilize o produto se o gel estiver seco ou tiver mudado de cor - Os limites de temperatura recomendados para o seu armazenamento são entre 5 °C (41 °F) e 40 °C (104 °F) - Verifique a data de validade na embalagem - A utilização indevida ou a aplicação incorreta do gel pode causar efeitos adversos e/ou tornar a terapia ineficaz.

ELIMINAÇÃO

O gel deve ser retirado de acordo com as orientações atuais. Eliminar a embalagem seguindo a gestão de resíduos recicláveis.

AVISO DE GARANTIA

A TELIC, S.A.U. garante que o produto cumpre o Regulamento (UE) 2017/745 de Produtos Sanitários e foi fabricado seguindo os procedimentos do sistema de gestão de qualidade da TELIC, S.A.U. certificado sob a norma ISO 13485. A TELIC, S.A.U. declina qualquer responsabilidade relativa a todos os custos médicos e danos diretos ou indiretos devidos à falta de funcionamento ou ao funcionamento incorreto dos produtos quando se utilizem sem respeitar as instruções de utilização. Recomendamos informar oportunamente sobre qualquer problema de funcionamento ou defeito do produto o Departamento de Garantia de Qualidade da TELIC, S.A.U. (incidents@telic.es). Em caso de incidente grave relacionado com o produto, este deve ser comunicado imediatamente à TELIC, S.A.U. e/ou à autoridade competente do Estado-Membro no qual o incidente teve lugar.

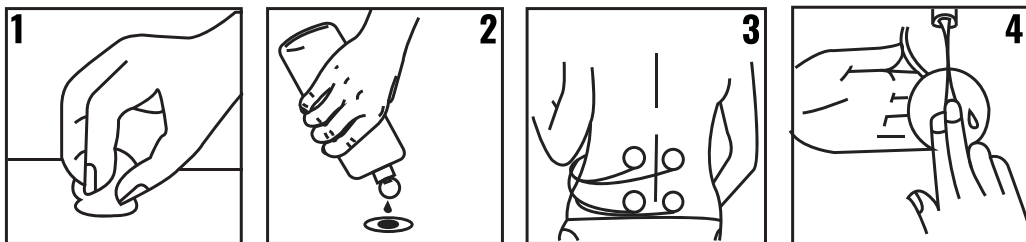

	Oznaczenie CE - CE-markering - Marchio CE - Marquage CE - CE marking - Marcado CE - CE-Kennzeichnung - CE-märke - Marcação CE
	Nie zawiera naturalnej gumy lateksowej - Bevat geen natuurlijk rubber-latex - Non contiene lattice di gomma naturale - Ne contient pas de caoutchouc de latex naturel - Does not contain natural rubber latex - No contiene o no hay presencia de látex de caucho natural - Naturlatexfrei - Innehåller inte naturligt gummilatex - Não contém látex de borracha natural
	Patrz instrukcja obsługi - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing - Consultare le istruzioni per l'uso - Consulter le mode d'emploi - Consult instructions for use - Consultense las instrucciones de uso - Siehe Gebrauchsanleitung - Se bruksanvisning - Consultar as instruções de utilização
	Wyrób medyczny - Medisch hulpmiddel - Dispositivo medico - Dispositif médical - Medical device - Dispositivo médico - Medizinprodukt - Medicinteknisk produkt - Dispositivo médico
	Limit czasu stosowania - Maximale gebruiksduur - Tempo limite di utilizzo - Délai d'utilisation - Time limit for use - Tiempo límite de uso - Innerhalb dieses Zeitraums verwenden - Tidsgräns för användning - Prazo limite de utilização
	Granice temperatury - Temperatuurlimieten - Limiti di temperatura - Limites de température - Temperature limits - Límites de temperatura - Temperaturgrenzen - Temperaturgränser - Limites de temperatura
	Chronić przed światłem słonecznym - Uit het zonlicht houden - Non esporre alla luce solare - Tenir à l'abri du soleil - Keep away from sunlight - Manténgase fuera de la luz del sol - Vor Sonnenlicht schützen - Förvaras utom solljus - Manter afastado da luz solar
	Przechowywać w suchym miejscu. - Droog houden - Mantenere asciutto - Garder au sec - Keep dry - Manténgase seco - Trocken aufbewahren - Förvaras torrt - Manter seco



TELIC, S.A.U.
Polígono Industrial Can Barri
C/ Moli d'en Barri, 7
08415 Bigues i Riells
Barcelona, España
www.telic.es

WITH THE GUARANTEE OF
TELIC GROUP

-MUB94/20210929-